

VITA AKZENT® Plus

Informação do produto



VITA Seleção de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 10.14

VITA shade, VITA made.

VITA

Otimiza. Simplesmente. Tudo.

Caracterizar, pigmentar e glazear - independentemente do coeficiente de expansão térmica (CET)



VITA AKZENT® Plus **Otimiza. Simplesmente. Tudo.**



Mais espaço de manobra no consultório e laboratório

Pretende caracterizar, pigmentar e glazear de forma fácil e eficiente? Nesse caso, VITA AKZENT Plus é a sua escolha.

O sistema de cores caracterizadoras, pigmentadoras e glazeadoras oferece-lhe o maior espaço de manobra possível no consultório e no laboratório.

É adequado a todos os materiais cerâmicos dentários e para qualquer CET.

Cores novas, novas formas de aplicação, novas indicações – VITA AKZENT Plus permite sempre uma escolha livre.

Em pó, pasta ou spray, você decide qual a forma de VITA AKZENT Plus que prefere e qual a mais eficiente para a sua aplicação.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Uniforme através de pressão do botão



KIT AKZENT Plus SPRAY

Gama

Produto	Cor	Conteúdo
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75ml
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Acessórios		



Especialmente adequado a utilizadores em laboratórios e consultórios que pretendem, por exemplo, adaptar a tonalidade de restaurações monolíticas. As cores do do glaze e pigmentos em spray estão prontas a utilizar e são fáceis de aplicar.

Vantagens:

- aplicação uniforme para um tratamento de superfície fácil e uniforme
- pulverização precisa sem perdas, graças a uma cabeça pulverizadora especial, nova



VITA AKZENT® Plus POWDER *alia flexibilidade e individualidade com eficácia*



KIT AKZENT Plus POWDER

Gama

Produto	Cor	Conteúdo
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Acessórios		



As massas VITA AKZENT Plus POWDER são especialmente adequadas a técnicos protésicos que pretendam caracterizar cerâmicas de facetas clássicas e a cerâmica de feldspato microestrutural VITA PM 9.

Vantagens:

- flexibilidade ilimitada e eficácia
- miscíveis entre si à sua escolha, para a obtenção de mais efeitos de cor individuais



VITA AKZENT® Plus PASTE Personalização rápida



KIT AKZENT Plus PASTE		
Gama		
Produto	Cor	Conteúdo
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Acessórios		



Os corantes VITA AKZENT Plus PASTE são excelentes para a caracterização rápida e fácil de restaurações, por exemplo, de VITABLOCS.

Vantagens:

- Pasta pronta a utilizar com consistência constante e pigmentação homogênea para aplicação rápida
- miscíveis entre si para a obtenção de efeitos de cor individuais
- diluíveis e/ou novamente miscíveis





O VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assegura uma consistência ótima, se as pastas estiverem secas ou ressequidas.

VITA AKZENT® Plus Cores naturalmente coloridas



Seleção de cores AKZENT Plus						
Gama						
Produto	Amostra de cor	Cor	Design. abrevia-da	Forma de administração		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – corantes translúcidos pigmentadores – para a alteração do efeito de cor do material base	    	Amarelo	BS01			
		Castanho amarelado	BS02			
		Laranja	BS03			
		Cinzentos verdeado	BS04			
		Castanho acinzentado	BS05			
EFFECT STAINS – corantes marcadores, com excelente cobertura – para efeitos de superfície naturais – para a coloração durante a estratificação	                 	Branco	ES01			
		Creme	ES02			
		Amarelo limão	ES03			
		Amarelo sol	ES04			
		Laranja	ES05			
		Vermelho ferrugem	ES06			
		Caqui	ES07			
		Rosa	ES08			
		Vermelho escuro	ES09			
		Lilás	ES10			
		Azul	ES11			
		Azul acinzentado	ES12			
		Cinzentos	ES13			
		Preto	ES14			
GLAZE – para superfícies brilhantes, homogêneas						
GLAZE-LT – massa de glaze de baixa fusão para cerâmicas com uma temperatura de cozedura inferior a 800 °C						
FINISHING AGENT – para superfícies acetinadas						

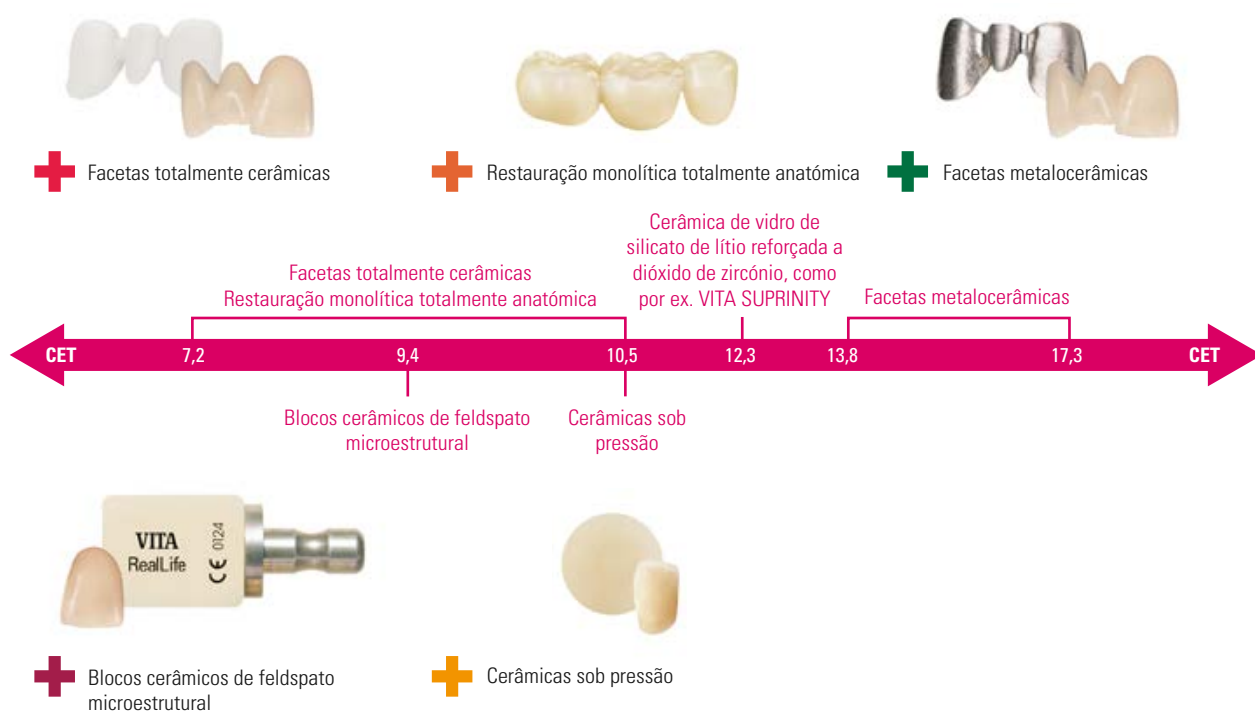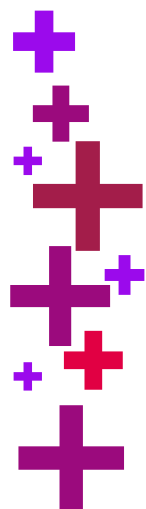

+ A vantagem da variedade

Pigmentar

Novo no sistema: pigmentos de glaze (Body Stains).

Os corantes translúcidos atuam como um fino filtro de cor.

Por este motivo são excelentes para:

- Coloração da superfície
- Alteração do efeito de cor do material base

Caracterizar

Grão especialmente fino: pigmentos marcadores (Effect Stains).

Estes corantes caracterizam-se em particular por:

- um efeito de cor intenso e
- uma elevada capacidade de cobertura

Por este motivo, são especialmente recomendados para a criação de efeitos de superfície naturais e coloração interna.

Glazear


Para o acabamento brilhante:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – a massa de Glazear para uma superfície brilhante, homogênea e glazeada
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – a massa de glaze de baixa fusão para cerâmicas com uma temperatura de cozedura inferior a 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – a massa de glaze para superfícies de facetas acetinadas

+ A vantagem do conforto de processamento

Todos os pigmentos são fluorescentes, possuem um grão extraordinariamente fino e cor estável. A consistência tixotrópica dos pós e das pastas facilita ainda a aplicação precisa da respetiva massa.

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.

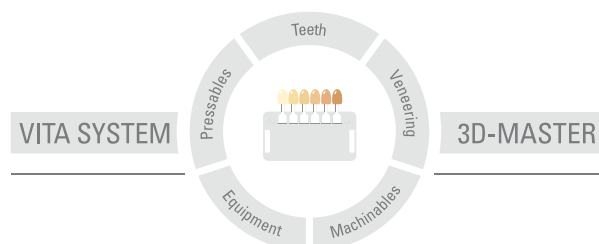

Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 10.14

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e em vigor encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e os seguintes produtos levam o selo CE 0124 :

VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik